



# Manual de uso: Irrigador rectal

Por favor, leer las instrucciones de uso acompañantes antes de utilizar el producto.

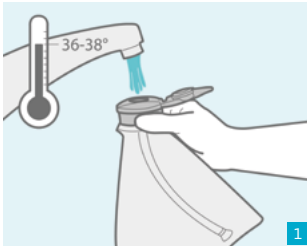


Llenar con agua templada (36–38 °C) la bolsa del agua hasta la marca de cero. Volver a cerrar la tapa después de llenar. Estará cerrada firmemente cuando se oiga un «clic».


Conectar el tubo flexible con el conector gris al cierre roscado de la tapa. Bloquear el conector girándolo 90° en el sentido de las agujas del reloj.

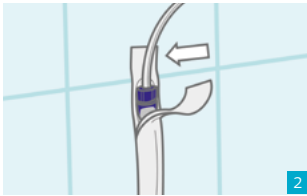

Abrir el envase del catéter solamente por la parte superior (2–3 cm). Conectar el catéter rectal al tubo flexible con el conector azul y girarlo 90° hasta que el conector encaje.

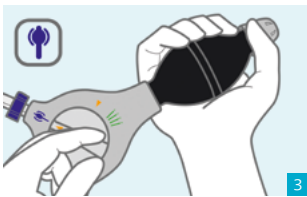

Girar el botón giratorio, para activar el recubrimiento del catéter, hasta el símbolo de agua y bombear agua en el envase del catéter (2–3 golpes de bombeo). Colocar el botón giratorio sobre el símbolo de balón para interrumpir el flujo del agua. Esperar 30 segundos hasta que se active el recubrimiento.

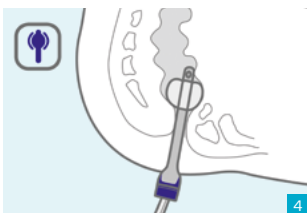

Introducir despacio y con cuidado el catéter hasta la empuñadura y bombear 1–2 veces para bloquear el catéter.

**Recomendación:** Cuando pueda quitar el balón tirando ligeramente de él o si sale agua, deberá bombear 1 vez más (máximo 3 veces en total).




Hacer la irrigación siempre a la misma hora: El momento óptimo es 30 minutos después del desayuno. Alternativamente después de la cena. Es importante mantener un ritmo fijo.

No usar ningún lubricante adicional: El lubricante adicional, por ejemplo, la vaselina, no es necesaria gracias al recubrimiento del catéter. Incluso pueden afectar la estabilidad del balón y hacerlo reventar.



Girar el botón giratorio al símbolo del agua y bombear agua lentamente en el recto. Proceder siempre en pasos de 100 ml hasta alcanzar la cantidad de agua necesaria.


**Recomendación:** Entre llenados con agua, girar siempre hacia el símbolo del balón para evitar un retorno de agua ya introducida.

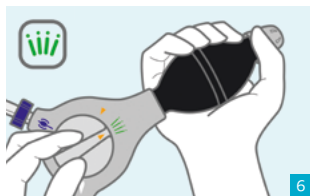

A continuación, girar el botón giratorio del mando hasta el símbolo del aire. Ahora tirar ligeramente del tubo flexible para quitar el catéter rectal.



Permanecer sentado en la taza. La evacuación del recto se auto activa. Si no ocurre esto, puede activar la evacuación con movimientos del tronco, masaje sobre el vientre o tosiendo. La evacuación es diferente en cada persona y dura por experiencia aproximadamente 30 minutos.

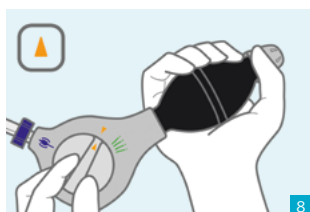

Separar el catéter rectal del sistema del tubo flexible y desecharlo en la basura. Separar después el tubo flexible de la bolsa y vaciar el agua restante. Girar el botón giratorio hacia el símbolo naranja; después puede colgar el sistema para que se seque.