


Инструкция по проведению очистительной клизмы

Пожалуйста, внимательно прочтите прилагаемую инструкцию перед применением изделия.

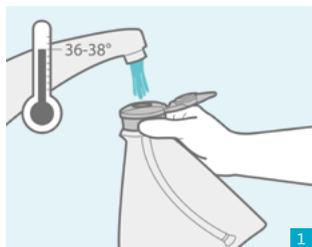

Наполните водяную сумку теплой водой (36 – 38 °C) до нулевой отметки. После наполнения сумки закройте ее крышкой. Крышка плотно закрывается, когда Вы услышите щелчок.

Вставьте серый соединитель на конце шланга в серый резьбовой затвор крышки. Зафиксируйте соединитель, повернув его на 90° по часовой стрелке.



Раскройте только верхний конец упаковки катетера (2 – 3 см). Вставьте в ректальный катетер синий соединитель шланга и поверните его на 90° до точки фиксации.



Для активации поверхностного покрытия катетера установите поворотный переключатель на символ воды и закачайте воду в катетер, находящийся в упаковке (качать 2 – 3 раза). Установите поворотный переключатель на символ баллона, чтобы прекратить подачу воды. Подождите 30 секунд, чтобы прошла активация покрытия.



Теперь медленно и осторожно введите катетер по самую рукоятку и 1 – 2 раза качните воду грушей, чтобы зафиксировать катетер.

Совет: если при легком натяжении шланга баллон извлекается или вытекает вода, следует еще 1 раз качнуть воду грушей (всего не более 3-х раз).

Делайте очистительную клизму всегда в одно и то же время: оптимальный момент – через 30 минут после завтрака. Альтернативный вариант – после ужина. Важно, чтобы соблюдался постоянный ритм.

Не используйте дополнительную смазку: дополнительные средства смазки, напр., вазелин, не требуются благодаря специальному покрытию катетера. Этим Вы даже можете нарушить прочность баллона и вызвать его разрыв.




Установите поворотный переключатель на символ воды и постепенно закачивайте воду в кишечник. Всегда добавляйте воду порциями по 100 мл до достижения требуемого объема.

Совет: между закачками порций воды переводить поворотный переключатель в положение символа баллона, чтобы не допустить вытекания закачанной воды.



Затем установите поворотный переключатель распределительного узла напротив символа воздуха. Слегка потяните шланг, чтобы извлечь ректальный катетер.

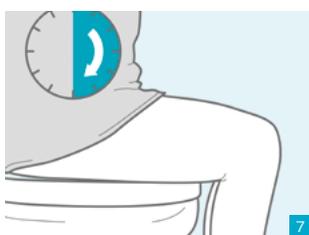

Оставайтесь на унитазе. Опорожнение кишечника сейчас начнется самопроизвольно. Если этого не происходит, Вы можете спровоцировать опорожнение посредством движений верхней части туловища, массажа живота или кашля. Длительность опорожнения индивидуальна и различна, и, как свидетельствует опыт, продолжается около 30 минут.



Отсоедините ректальный катетер от шланга и утилизируйте его как бытовой мусор. Затем отсоедините шланг от водяной сумки и вылейте оставшуюся воду. Установите поворотный переключатель на оранжевый символ, после чего можно повесить систему на просушку.